

## 测试报告

样品信息			
样品名称	异福胶囊异烟肼	编号	W20130626-001
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2013/08/26	测试期间	2013/08/26-08/29
样品描述			
测试需求			
测试成分	含量测定		
参考标准			
参考标准	无	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	FL2200

● 色谱条件:

调整过比例

色谱柱:	月旭 Ultimate®Polar-RP (4.6*250mm, 5μm)
流动相:	缓冲液: 甲醇: 水=10: 5: 85
检测波长:	254nm
柱温:	35°C
流速:	1.5ml/min
进样量:	20μl
注意事项:	/

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com

- 流动相配置:

缓冲液: 精密称取 80.0053g 磷酸二氢钾, 15.3001g 磷酸氢二钾至 1000ml 水中, 溶解, 过滤。


流动相: 缓冲液: 甲醇: 水=10: 5: 85

- 样品处理方法:

直接进样

- 谱图和数据:

1. 对照

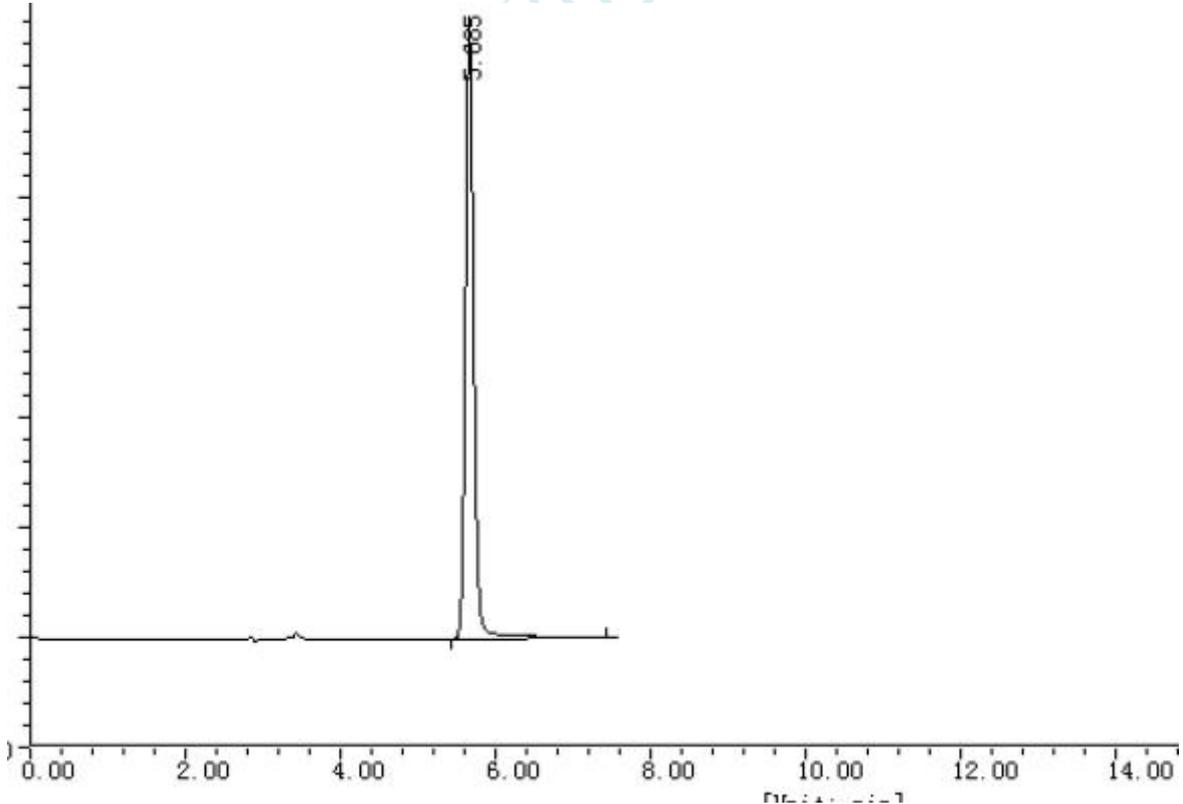

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760


邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com

系统评价

峰序	组分名	保留时间 [min]	半峰宽 [min]	理论塔板数	分离度	拖尾因子
1		5.685	0.111	14619	7.213	1.155

2. 样品

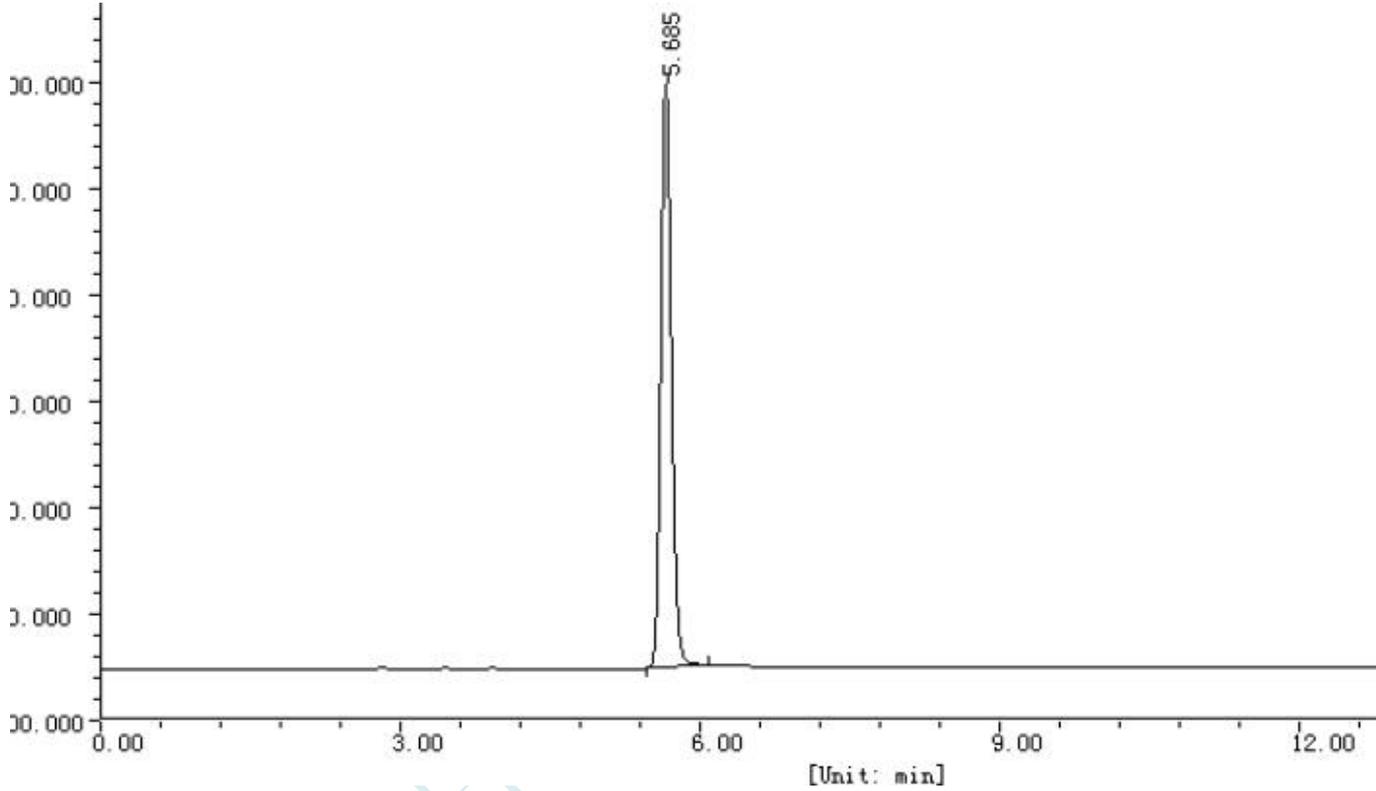

系统评价

峰序	组分名	保留时间 [min]	半峰宽 [min]	理论塔板数	分离度	拖尾因子
1		5.685	0.112	14358	0.000	1.172

报告签字

测试: 李良翔

日期: 2013/08/29

审核: 薛昆鹏

日期: 2013/08/29

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com