

测试报告

样品信息			
样品名称	二甲基苯氧乙酸	编号	W20130503
样品重量	\	剂型	\
收样日期	20130503	测试期间	20130507
样品描述	\		
测试需求			
测试成分	含测		
参考标准			
参考标准	高效液相色谱法	标样	无
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	安捷伦 1290

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate®XB-C18 (4.6*250mm, 5μm)
流动相:	甲醇-磷酸水溶液 (磷酸调节 pH: 2.5) =65:35
检测波长:	280nm
柱温:	30℃
流速:	1ml/min
进样量:	20μl
注意事项:	无

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市张江高科技园区爱迪生路 326 号 B102

邮编: 201203

Tel:86-021-51320401

E-mail:zoujiaoben@welchmat.com

● 流动相配置:


甲醇-磷酸水溶液 (磷酸调节 pH: 2.5) =65:35, 均用 0.45μm 滤膜过滤。

● 样品处理方法:

供试品制备: 精密称取本品加 (甲醇-水=50:50) 溶解, 制成浓度为 0.2mg/ml, 充分溶解混匀后过滤既得;

● 谱图和数据:

1. 供试品图

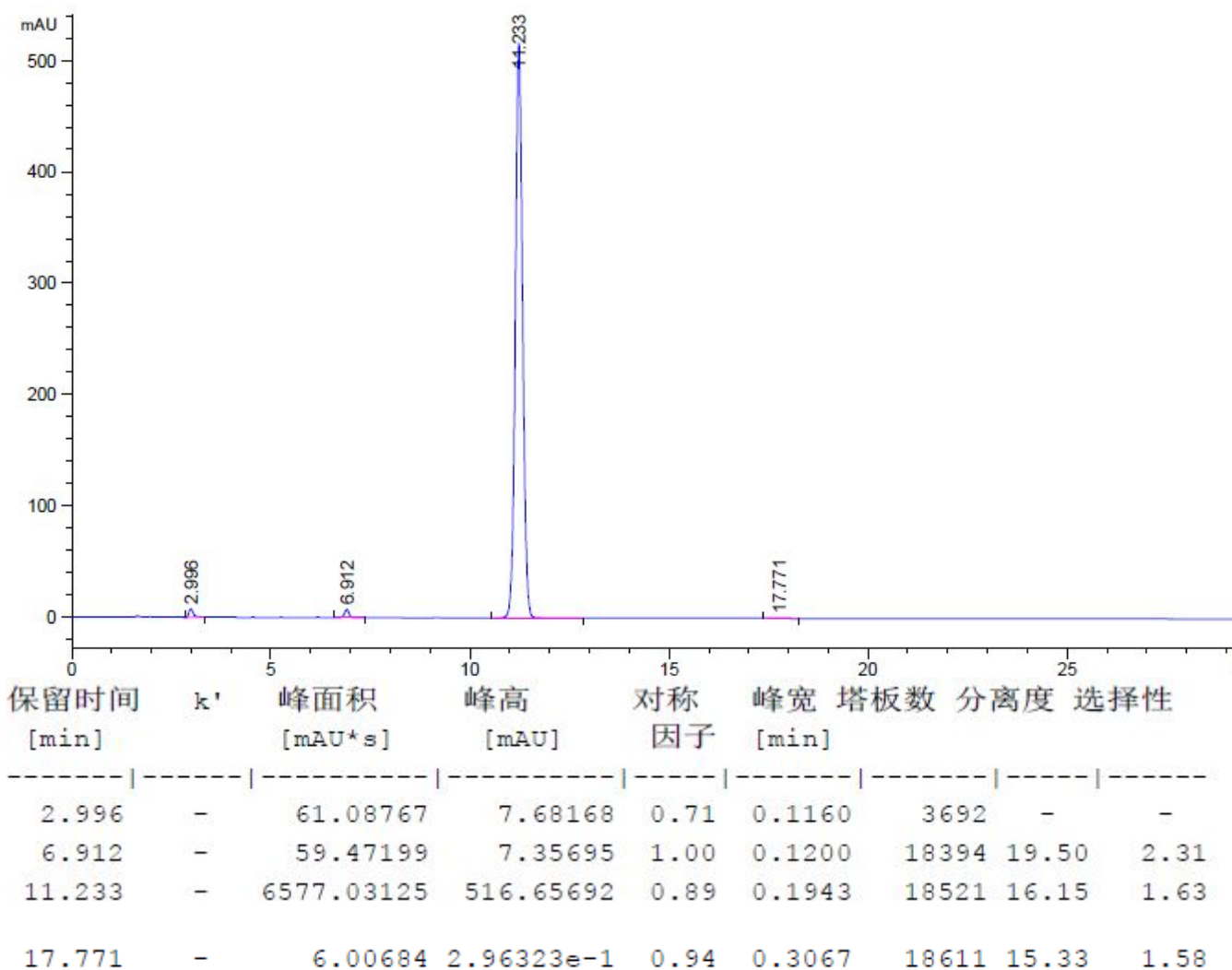

报告签字

测试: 张厚才

日期: 2013-05-07

审核: 陈再洁

日期: 2013-05-07

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:上海市张江高科技园区爱迪生路 326 号 B102

Tel:86-021-51320401

邮编: 201203

E-mail:zoujiachen@welchmat.com