

测试报告

样品信息			
样品名称	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	编号	W20130731-001
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2013/07/31	测试期间	2013/07/31-08/06
样品描述			
测试需求			
测试成分	手性分离		
参考标准			
参考标准	无	标样	无
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	FL2200

● 色谱条件:

调整过比例

色谱柱:	月旭 Ultimate®XB-C18 (4.6*250mm, 5μm)
流动相:	(D-苯丙氨酸 1.32g, 硫酸铜 1.00g 至 1000ml 水, NaOH 调 PH=3.50): 甲醇=82:18
检测波长:	293nm
柱温:	35°C
流速:	1.0ml/min
进样量:	20μl
注意事项:	/

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com


● 流动相配置:

(D-苯丙氨酸 1.32g, 硫酸铜 1.00g 至 1000ml 水, NAOH 调 PH=3.50): 甲醇=82:18

● 样品处理方法:

直接进样

● 谱图和数据:

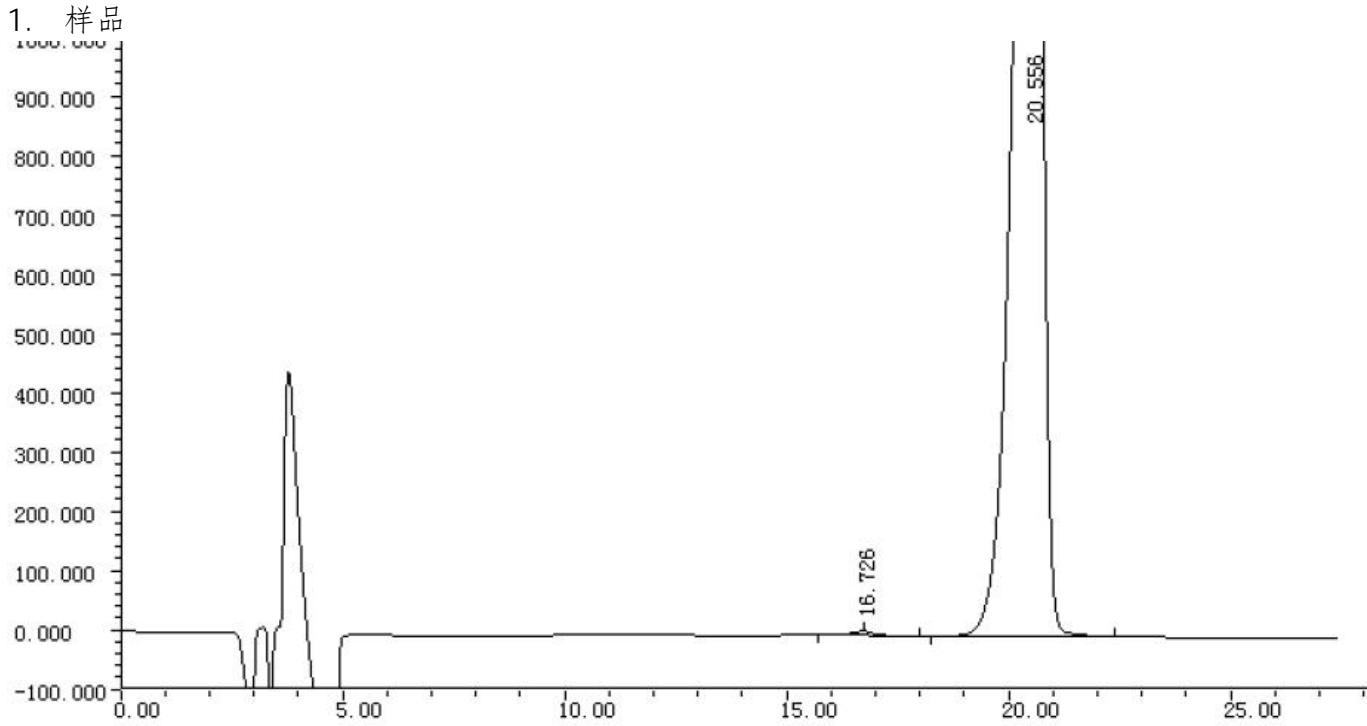

峰序	组分名	保留时间 [min]	半峰宽 [min]	理论塔板数	分离度	拖尾因子
1		16.726	0.558	4983	2.040	0.732
2		20.556	0.800	3660	3.322	0.761

报告签字

测试: 李良翔

日期: 2013/08/06

审核: 薛昆鹏

日期: 2013/08/06

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com