

## 测试报告

样品信息			
样品名称	坤宁口服液	编号	W20140422-001
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2014/04/22	测试期间	2014/04/22-04/23
样品描述			
测试需求			
测试成分	盐酸水苏碱含量测定		
参考标准			
参考标准	企业标准	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	福立

● 色谱条件:

调整过比例

色谱柱:	月旭 Ultimate®XB-SCX- I (4.6*150mm, 5μm)
流动相:	15mmol/L 磷酸二氢钾溶液 (含 0.04%三乙胺和 0.15%磷酸)
检测波长:	192nm
柱温:	35℃
流速:	1.0ml/min
进样量:	20μl
注意事项:	/

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市仙缘路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000


E-mail:Houcaizhang@welchmat.com

● 流动相配置:

15mmol/L 磷酸二氢钾溶液 1000ml 中, 加三乙胺 0.4ml 和磷酸 1.5ml, 混匀, 过滤

● 谱图和数据:

1. 盐酸水苏碱

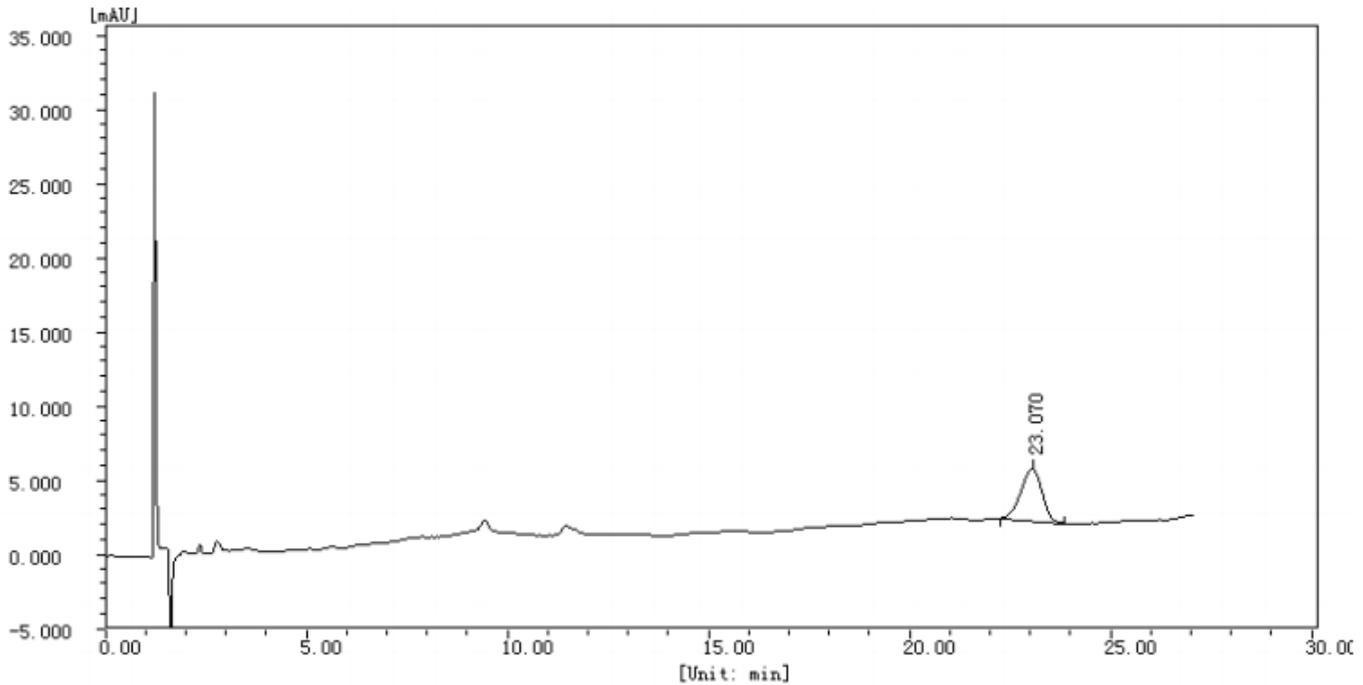

分析结果

峰序	组分名	保留时间 [min]	半峰宽 [min]	峰高 [uAU]	峰面积 [uAU*s]	峰面积 [%]	含量 [%]	峰类型
1		23.070	0.586	3563.0	132136.2	100.0000	100.0000	BB
总计:				3563.0	132136.2	100.0000	100.0000	

系统评价

峰序	组分名	保留时间 [min]	半峰宽 [min]	理论塔板数	分离度	拖尾因子
1		23.070	0.586	8576	0.000	0.833

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。


Add:浙江省金华市仙缘路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com

2. 供试品溶液

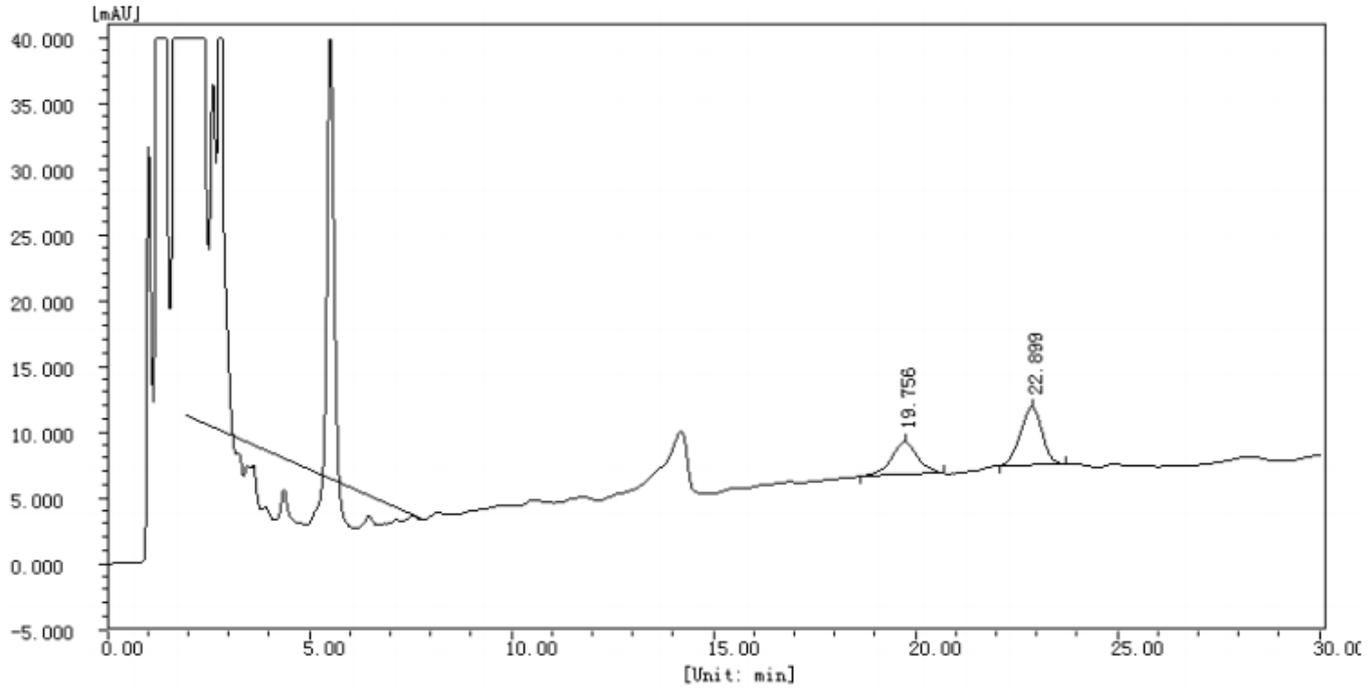

分析结果

峰序	组分名	保留时间 [min]	半峰宽 [min]	峰高 [uAU]	峰面积 [uAU*s]	峰面积 [%]	含量 [%]	峰类型
1		19.756	0.683	2559.1	117656.3	41.3701	41.3701	BB
2		22.899	0.588	4420.7	166743.2	58.6299	58.6299	BB
总计:				6979.7	284399.4	100.0000	100.0000	

系统评价

峰序	组分名	保留时间 [min]	半峰宽 [min]	理论塔板数	分离度	拖尾因子
1		19.756	0.683	4639	0.000	1.147
2		22.899	0.588	8392	0.000	1.013

报告签字

测试: 郭德勇

日期: 2014/04/23

审核: 薛昆鹏

日期: 2014/04/23

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市仙缘路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com