

测试报告

样品信息			
样品名称	重组人尿激酶	编号	W20171124-003
样品重量	\	剂型	\
收样日期	2017/11/24	测试期间	2017/12/06-12/08
样品描述			
测试需求			
测试成分			
参考标准			
参考标准	无	标样	无
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	月旭 Wisys 5000

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Xtimate® SEC-120 (7.8×300mm , 5μm)
流动相:	0.01mol/L 磷酸二氢钾 (含 0.4mol/L 氯化钠), 用磷酸调 pH 至 6.8
检测器:	280nm
柱温:	25°C
流速:	0.8ml/min
进样量:	30μL
注意事项:	/

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

邮编: 321000

Tel:400-810-6969

E-mail:guodeyong@welchmat.com

● 流动相配置:


流动相: 取磷酸二氢钾与氯化钠适量, 加水溶解制成每 1ml 含磷酸二氢钾 10mmol 与氯化钠 0.4mol 的混合溶液, 用磷酸调 pH 至 6.8, 过滤;

● 样品溶液的配置:

样品溶液: 客户提供

● 谱图和数据

1、 样品溶液:

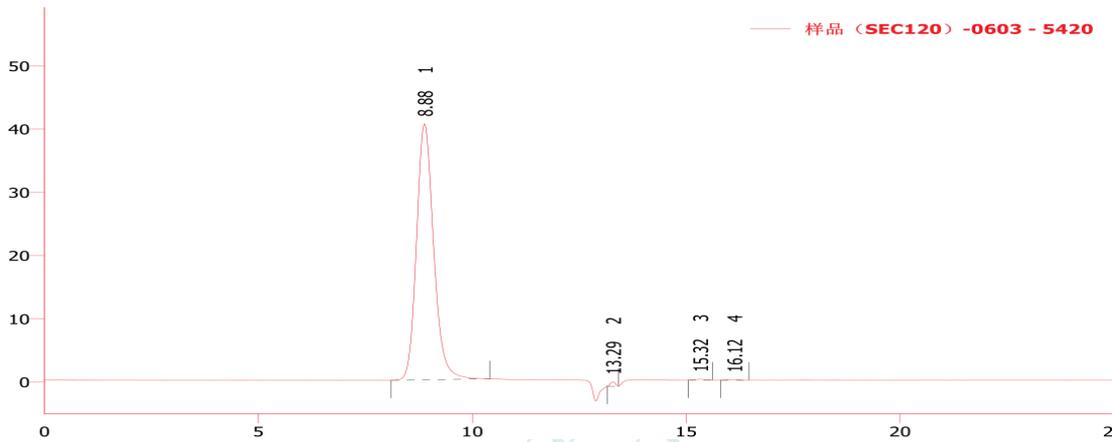

结果表(不计算 - 样品 (SEC120) -0603 - 5420)

	保留时间 [min]	峰面积 [mV. s]	峰高 [mV]	面积 [%]	柱效 [th. pl]	分离度 [-]	对称/拖尾因子 [-]
1	8.882	1132.820	40.477	99.3	2439		1.184
2	13.285	5.530	0.698	0.5	54999	9.334	0.959
3	15.320	1.774	0.132	0.2	30940	7.097	1.027
4	16.118	1.243	0.078	0.1	27208	2.166	1.099
	合计	1141.366	41.385	100.0			

● 结论

月旭 Xtimate® SEC-120 (7.8×300mm , 5μm), 在此色谱条件下检测, 可以达到测试要求。

报告签字

测试: 郭德勇

日期: 2017-12-08

审核: 吴小梅

日期: 2017-12-08