

测试报告

样品信息			
样品名称	葡萄糖-D-木糖-山梨糖醇	编号	W201506728-001
样品重量		剂型	
收样日期	2015/07/28	测试期间	2015/0728-08/04
样品描述			
测试需求			
测试成分	葡萄糖, D-木糖, 山梨糖醇		
参考标准			
参考标准	高效液相色谱法	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	安捷伦 1260

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Xtimate®Sugar-Ca (7.8*300mm , 5µm)
流动相:	纯水
检测波长:	示差检测器
柱温:	柱温 80°C , 检测器 : 40°C
流速:	0.3ml/min
进样量:	10µl
注意事项:	

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市张江高科技园区爱迪生路 326 号 B102


邮编: 201203

Tel:86-021-51320401

E-mail:zoujiaoben@welchmat.com

● 谱图和数据:

1. 对照品

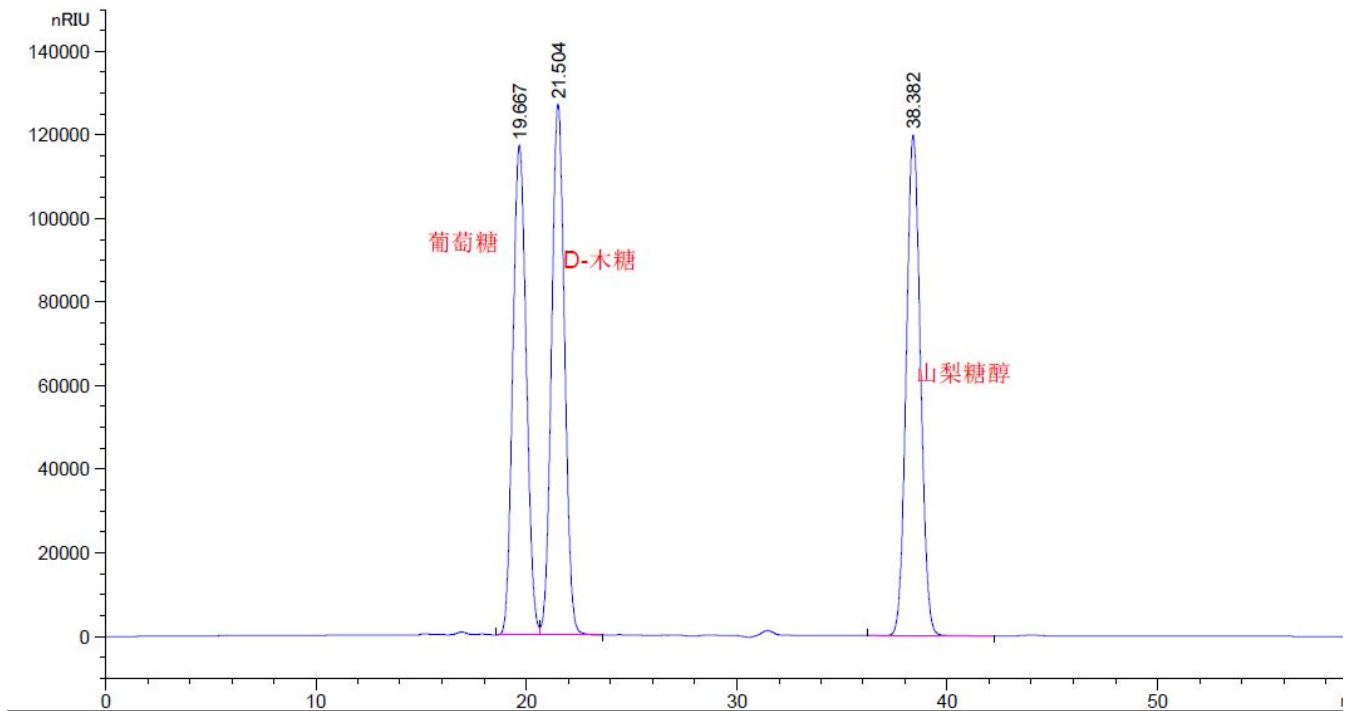

保留时间 [min]	k'	峰面积 [nRIU*s]	峰高 [nRIU]	对称 因子	峰宽 [min]	塔板数	分离度	选择性
-	-	0.00000	0.00000	0.00	-	-	-	-
19.667	-	5.22594e6	1.17123e5	0.91	0.7088	4267	-	-
21.504	-	5.47644e6	1.26945e5	0.94	0.6765	5600	1.56	1.09
38.382	-	5.63241e6	1.19833e5	0.91	0.7328	15200	14.07	1.78

报告签字

测试: 张厚才

日期: 2015/8/04

审核: 陈再洁

日期: 2015/8/04

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市张江高科技园区爱迪生路 326 号 B102

Tel:86-021-51320401

邮编: 201203

E-mail:zoujic@welchmat.com