

## 测试报告

样品信息			
样品名称	藤黄健骨丸	编号	Z20220812-009
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2022/08/12	测试期间	2022/09/25-09/27
样品描述	/		
测试需求			
测试成分	含量测定		
参考标准			
参考标准	中国药典 2020 版 一部	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	赛默飞 U3000

### ● 色谱条件:

色谱柱:	Xtimate® C18 (4.6×250mm, 5μm)
流动相:	甲醇/水/冰醋酸 =55/45/0.5
检测波长:	270nm
柱温:	30℃
流速:	1.0ml/min
进样量:	20μL
注意事项:	\

### ● 流动相配置:

取色谱纯甲醇 550ml, 娃哈哈水 450ml, 醋酸 5ml, 混匀, 超声脱气, 即得。




## ● 样品溶液的配置：

对照品溶液：取淫羊藿苷对照品适量，加甲醇制成每 1mL 含 25 $\mu$ g 的溶液，即得。


供试品溶液：取本品，剪碎，称取约 2.8g，置具塞锥形瓶中，加入稀乙醇 20mL，超声处理 60 分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

## ● 谱图和数据

### 1、对照品溶液

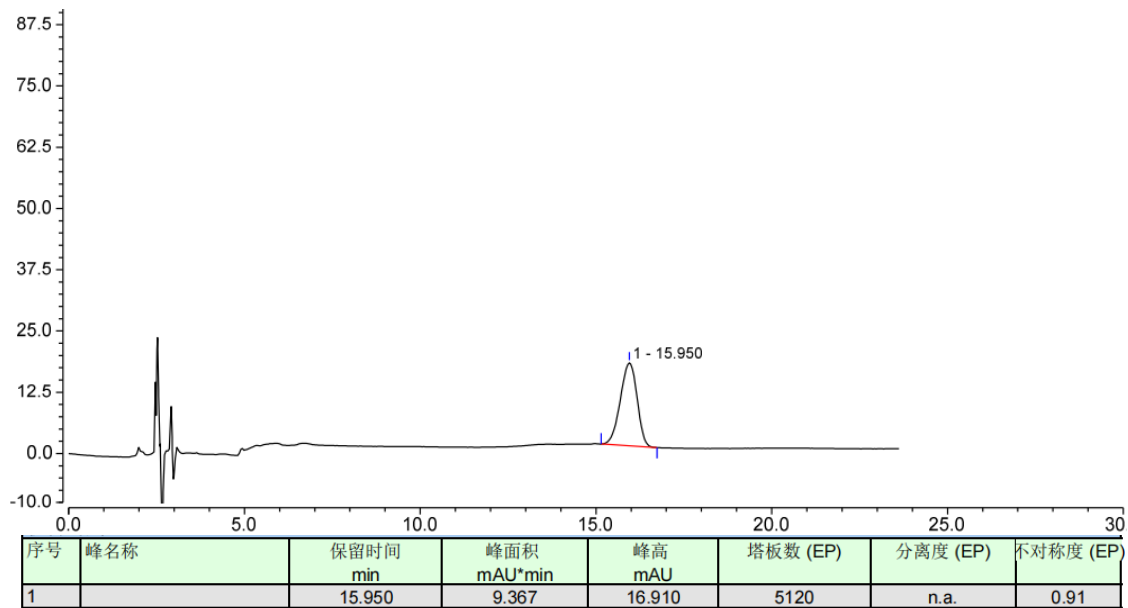

### 2、供试品溶液

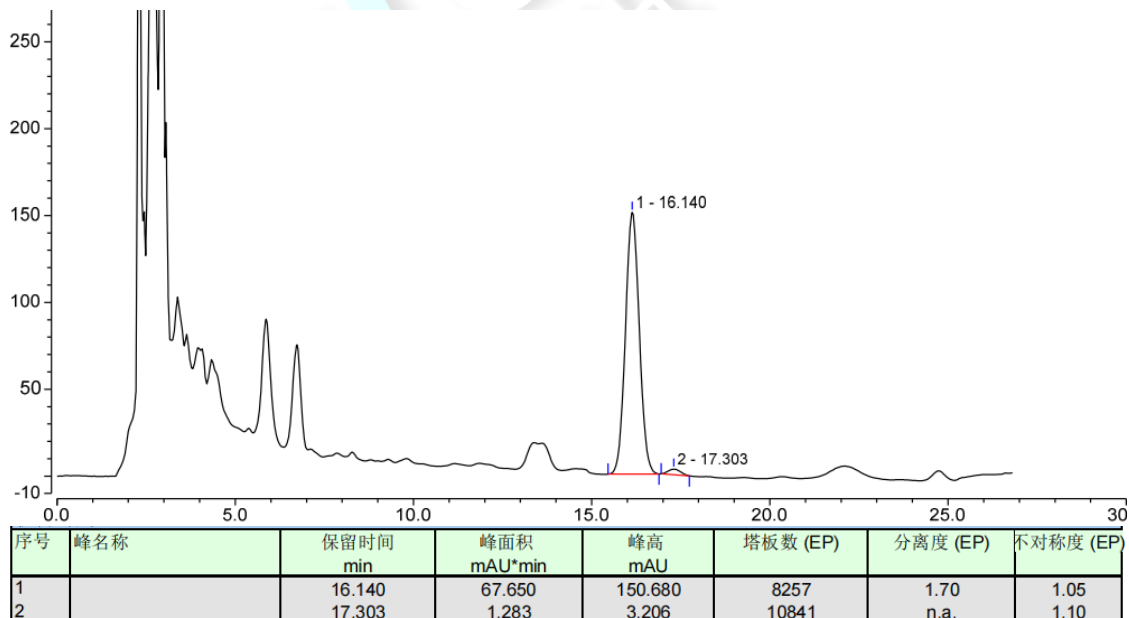

## ● 结论

用 Xtimate<sup>®</sup> C18 (4.6 $\times$ 250mm, 5 $\mu$ m) 色谱柱，在此色谱条件下测定，能满足检测的要求。

